

Kojenecká váha Kojenecká váha

B-5060


Návod k obsluze - Návod na obsluhu



BRAVO

III/09 CZ/SK

Isolit-Bravo spol. s r. o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

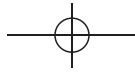

ČESKY

Předpokládané použití:

Elektronická váha (dále jen váha) je speciálně navrhnutá pro vážení kojenců, především pro sledování jejich přírůstků hmotnosti.

Váha nesmí být použita pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifikovaných v bodu 1 § 2 a nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Váhu používejte pouze jako zdravotnickou pomůcku.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím pozorně celý návod před použitím a pak jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Baterie umístěte dle uvedené polaritě (+, -).
- Zabraňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.
- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění váhy.
- S váhou neházejte ani netřepejte.
- Do váhy vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyjměte baterie z váhy pokud ji dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Váhu nerozebírejte a neopravujte, odstranění závad svěďte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Nezatěžujte váhu během skladování.
- Váha musí být umístěna na tvrdém a rovném povrchu, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte.
- Při vážení by se dítě nemělo prudce pohybovat, aby se váha nezničila.
- Umístěte dítě do středu misky, jinak nebude jeho váha adekvátní.

UPOZORNĚNÍ:

Při zatížení váhy nad 20,5kg dojde k nevratnému poškození váhy, případná reklamace nemůže být uznána.

Použití tohoto zařízení se v žádném případě nevyrovná doporučení lékaře.

Budete-li mít jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého lékaře.

Isolit-Bravo, spol. s r.o. nebude v žádném případě odpovídat za nesprávnou interpretaci výsledků měření.

SLOVENSKY

Předpokládané použitie:

Elektronická kojenecká váha (ďalej len váha) je špeciálne navrhnutá pre váženie kojencov, predovšetkým na sledovanie ich nárastu hmotnosti.

Váha nesmie byť použitá na určovanie hmotnosti v obchodnom styku, pre výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, k určovaniu cien a k ďalším účelom špecifikovaných v bode 1 § 2 a nariadení vlády č. 293/2000 Zb.

Váhu používajte len ako zdravotnícku pomôcku.

Bezpečnostné upozornenia:

- Prečítajte si prosím pozorne celý návod pred použitím a potom ho uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polaritě (+, -).
- Zabráňte skratu batérií vodivými predmetmi (kľúče, skrutkovač).
- Nepoužívajte váhu v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny k čisteniu váhy.
- S váhou nehádzajte ani netrepte.
- Do váhy vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
- Vyberte batérie z váhy pokiaľ ju dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Váhu nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad zverte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Nezaťažujte váhu počas skladovania.
- Váha musí byť umiestnená na tvrdom a rovnom povrchu, aby bola zaistená bezpečnosť dieťaťa.
- Pri vážení by sa dieťa nemalo prudko pohybovať, aby sa váha nezničila.
- Umiestnite dieťa do stredu misky, inak nebude jeho váha adekvátna.

UPOZORNENIE:

Pri zaťažení váhy nad 20,5kg dôjde k nezvratnému poškodeniu váhy, prípadná reklamácia nemôže byť uznaná.

Použitie tohto zariadenia sa v žiadnom prípade nevyrovná doporučeniu lekára.

Ak budete mať akékoľvek pochybnosti, obraťte sa na svojho lekára.

Isolit - Bravo, spol. s r.o. nebude v žiadnom prípade zodpovedať za nesprávnú interpretáciu výsledkov merania.

ČESKY

Uvedení do provozu:

Vyjměte váhu z krabice.

Zkontrolujte zda není poškozena přepravou.

Otevřete kryt na spodní straně váhy a vložte 4 baterie typu AA, dbejte na správnou polaritu (+/-).

Popis přístroje:

1. tvarované tělo váhy
2. displej
3. tlačítko ON/OFF
4. tlačítko MUSIC



Použití přístroje:

Položte váhu na pevný a vodorovný povrch.

Stiskněte tlačítko ON/OFF (3) k zapnutí váhy.

Po zapnutí dojde k zobrazení všech segmentů na displeji a v této době můžete měnit váhové jednotky.

Pro změnu váhové jednotky stiskněte tlačítko ON/OFF (3) (kg nebo lb). Zvolená váhová jednotka se zobrazí na displeji vpravo nahore.

Vážíte-li dítě nahé:

Něžně položte dítě na váhu a snažte se ho udržet co nejvíce v klidu.

Na displeji se zobrazí aktuální váha.

Něžně sundejte dítě z váhy.

Váha se vypne automaticky během několika sekund.

Váha je opatřena pamětí, kde se automaticky zaznamenává poslední vážený údaj. Podmínkou je, že tato váha musí být větší než 1kg.

Vážíte-li dítě s ručníkem nebo přepravní brašnou:

Nejprve položte na váhu ručník nebo přepravní brašnu.

Na displeji se objeví navážená hodnota.

Zmáčknete ještě jednou ON/OFF a váha se vynuluje.

Něžně položte dítě na váhu a snažte se ho udržet co nejvíce v klidu.

Na displeji se zobrazí aktuální váha.

Něžně sundejte dítě z váhy.

Váha se vypne automaticky během několika sekund.

Váha je opatřena pamětí, kde se automaticky zaznamenává poslední vážený údaj. Podmínkou je, že tato váha musí být větší než 1kg.

SLOVENSKY

Uvedenie do prevádzky:

Vyberte váhu z krabice.

Skontrolujte či nie je poškodená prepravou.

Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte 4 batérie typu AA, dbajte na správnu polaritu (+/-).

Popis prístroja:

1. tvarované telo váhy
2. displej
3. tlačidlo ON/OFF
4. tlačidlo MUSIC

Použitie prístroja:

Položte váhu na pevný a vodorovný povrch.

Stlačte tlačidlo ON/OFF (3) k zapnutiu váhy.

Po zapnutí dôjde k zobrazeniu všetkých segmentov na displeji a v tejto dobe môžete meniť váhové jednotky.

Pre zmenu váhovej jednotky stlačte tlačidlo ON/OFF (3) (kg alebo lb). Zvolená váhová jednotka sa zobrazí na displeji vpravo hore.

Ak vážite dieťa nahé:

Nežne položte dieťa na váhu a snažte sa ho udržať čo najviac v pokoji.

Na displeji sa zobrazí aktuálna váha.

Nežne zoberte dieťa z váhy.

Váha sa vypne automaticky počas niekoľkých sekúnd.

Váha je vybavená pamäťou, kde sa automaticky zaznamenáva posledný vážený údaj. Podmienkou je, že táto váha musí byť väčšia než 1kg.

Ak vážite dieťa s uterákom alebo prepravnou taškou:

Najskôr položte na váhu uterák alebo prepravnú tašku.

Na displeji sa objaví navážená hodnota.

Stlačte ešte raz ON/OFF a váha sa vynuluje.

Nežne položte dieťa na váhu a snažte sa ho udržať čo najviac v pokoji.

Na displeji sa zobrazí aktuálna váha.

Váha sa vypne automaticky během několika sekund.

Váha je opatřena pamětí, kde se automaticky zaznamenává poslední vážený údaj. Podmínkou je, že tato váha musí být větší než 1kg.

ČESKY

POZNÁMKA:

Je-li váha zapnutá, můžete během vážení spustit zvučnou melodii, která je uložena v paměti váhy. To může upoutat pozornost Vašeho dítěte. Zapnutí i vypnutí se provádí tlačítkem „MUSIC“ (4).

DOPORUČENÍ:

Baterie se doporučují vyměnit hned v okamžiku zobrazení jejich nízkého stavu "Lo". Pokud nebudete váha delší dobu používat, vyměňte baterie.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je vážené dítě neklidné, nemusí dojít k zobrazení aktuální váhy.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Odstranění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy podle uvedené polaritu (+, -).
Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou měřicí jednotku.
Zkontrolujte, aby váha byla na rovném povrchu.

Čištění:

Čistěte váhu měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla! Neponořujte váhu do vody ani ji nevkładajte do myčky nádobí.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximální zatížení: 20kg/44lb
Citlivost váhy: 0,01kg
Minimální hmotnost: 0,02kg
Jednotky pro vážení: kg/lb-oz
Provozní teplota: od +10°C do +35°C
Napájení: 4x AA baterie

SLOVENSKY

POZNÁMKA:

Ak je váha zapnutá, môžete počas váženia spustiť zvučnú melódiu, ktorá je uložená v pamäti váhy. To môže upútať pozornosť Vašho dieťaťa. Zapnutie a vypnutie sa vykonáva tlačidlom „MUSIC“ (4).

DOPORUČENIE:

Batérie sa doporučujú vymeniť hneď v okamihu zobrazenia ich nízkého stavu "Lo". Pokiaľ nebudete váhu dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

UPOZORNENIE:

Pokým je vážené dieťa nepokojné, nemusí dôjsť k zobrazeniu aktuálnej váhy.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľa nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebíča.

Odstránenie závad pri prevádzke:

Zkontrolujte, či sú batérie správne vložene podľa uvedenej polaritu (+, -).
Zkontrolujte, či ste zvolili správnu meraciu jednotku.
Zkontrolujte, aby váha bola na rovnom povrchu.

Čistenie:

Čistite váhu mäkkým suchým obrúskom. Nepoužívejte organické rozpúšťadlá! Nevnárajte váhu do vody ani ju nevkładajte do umývačky riadu.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximálne zaťaženie: 20kg/44lb
Citlivosť váhy: 0,01kg
Minimálna hmotnosť: 0,02kg
Jednotky pre váženie: kg/lb-oz
Prevádzková teplota: od +10°C do +35°C
Napájanie: 4x AA batérie

ČESKY

Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případně škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce spotřebiče a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třídte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

SLOVENSKY

Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon podľa §55 vyhlášky MŽP SR č.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektro spotrebičmi a elektro odpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca spotrebiča a vykonáva ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odevzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- v ostatných miestach "spätneho odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša). Obalový materiál odevzdejte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Takýmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

Krabice a papierové proložky - triedený zber papieri
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do zberného dvora.

Servisné zabezpečenie:

Isolit - Bravo Slovakia spol. s r. o.
Hviezdoslavova 48
010 67, Žilina
tel.: 041/500 66 82, e-mail: info@bravospotrebiце.sk
Opravu zabezpečuje tiež sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte na vyššie uvedenom tel. čísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a aktualizovanom na internetovej stránke www.bravospotrebiце.sk.

ČESKY

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku. Kupující je povinen při reklamaci přiložit k výrobku doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy záruční list nebo prodejní doklad, uvést důvod reklamace, vadu popsat a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech,

SLOVENSKY

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovávať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravu výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii priložiť k výrobku doklad, dokazujúci dátum zakúpenia výrobku, teda záručný list alebo predajný doklad, uviesť dôvod reklamácie, vadu popísať a napísať, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púdzrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu

ČESKY

napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).

- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nenesí odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství nebo pro možnost jeho výroby, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterie), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézok a struhadel).

- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

- Změna barvy topných ploch nebo montážního a

SLOVENSKY

predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätíu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávně použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv).

- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávný chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo častí výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo častí výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných ploch alebo montážneho a

ČESKY

izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézok, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nebo prodejcem výrobku, nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebitel, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 1. 2009

SLOVENSKY

izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrábanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjaciých cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou častí výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebiteľného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. alebo predajcom výrobku, nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručních podmienok od 1. 1. 2009

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kojenecká váha**
Kojenecká váha

Typ: B-5060

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r.o.**

561 64 Jablonné nad Orlicí

tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000

Dovozca do SR:

Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Žilina

tel: +421 415 006 682, fax: +421 415 006 683, GSM: +421 910 904 984

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:

.....

Reklamáce / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka - adresa vč. PSČ:

.....

Důvod reklamáce / Dôvod reklamácie:

.....

.....

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

.....

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

.....

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

.....

.....

.....

KONTO
BRAVO

20

B-5060